

Fabricado por:

 callegari
1930



NACIO UNA ESTRELLA

La ultima tecnologia
en analisis de piel



Soft FX

Análisis para todas las áreas del cuerpo



LA SIGUIENTE GENERACIÓN EN TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS

Descubra el exclusivo analizador de piel **Soft FX** diseñado para respaldar su clínica o tienda especializada de piel y apoyar el profesionalismo de todos los operadores del cuidado de la piel. Identificar las preocupaciones sobre el cuidado de la piel y monitorear el progreso es esencial para establecer un plan de cuidado de la piel para sus clientes y garantizar un asesoramiento personalizado a lo largo del tiempo.

Soft FX proporciona una variedad de características exclusivas que satisfacen las necesidades de los profesionales, incluidas las últimas soluciones de análisis rápido, varias consultas para diferentes áreas del cuerpo, comparación de resultados e imágenes antes y después del tratamiento y envío de informes de la piel por correo electrónico.

Dispositivo compacto y totalmente autónomo. Los informes y archivos de los clientes se almacenan en el dispositivo

Diseño icónico, características y funciones. Inteligente y brillante pantalla táctil HDMI de ángulo completo de 10,1 pulgadas

Función de cámara frontal Selfie para un cuidado de la piel específico y personalizado

Completamente inalámbrica, sondas de recarga rápida

Lecturas rápidas de las condiciones de la piel e imágenes visuales en un solo dispositivo

Soft
FX

ANÁLISIS DE PIEL EXCLUSIVO DE USO MÚLTIPLE

Cubre todas las preocupaciones sobre el cuidado de la piel de sus clientes



PRUEBAS RÁPIDAS - SONDAS

Las sondas y tiras inteligentes brindan mediciones en tiempo real de la piel para identificar problemas clave del cuidado de la piel. Simplemente presione sobre la piel y vea los resultados de:

- » Hidratación
- » Elasticidad
- » Melanina
- » Sebo
- » pH

IMAGEN VISUAL BRILLANTE - CÁMARA

Las imágenes HD claras muestran a sus clientes cómo se ve realmente la piel, mientras que la evaluación de imágenes por computadora brinda la información que necesita para explicar los problemas y las recomendaciones de la piel y el cabello.


- » Pigmentación
- » Poros
- » Arrugas
- » Textura
- » Enrojecimiento
- » Queratina
- » Diámetro del cabello
- » Estructura del cabello
- » Densidad del cabello
- » Caspa




PIGMENTACIÓN



BORDILLO

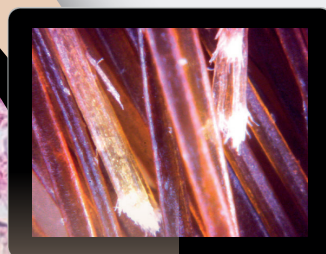

**ESTRUCTURA
DEL CABELLO**

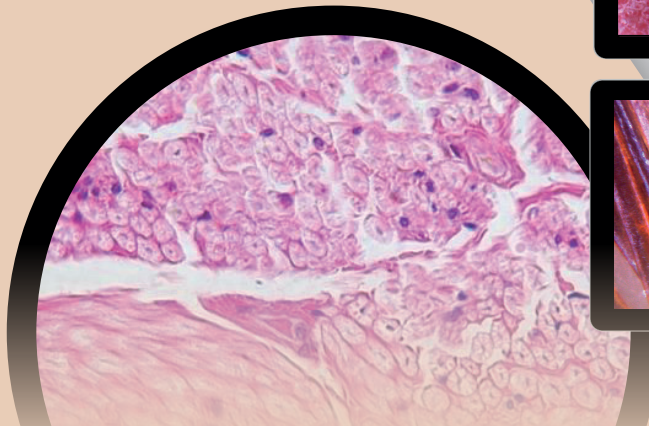

CONSULTAS

Las consultas son muy fáciles de usar, evaluaciones totalmente guiadas, que utilizan solo las sondas y/o imágenes visuales con la cámara, que brindan un análisis de la piel sin igual de diferentes áreas del cuerpo. Las consultas incluyen:



TEZ

Chequeo

Desarrollado para identificar y evaluar las preocupaciones clave de la piel, incluidos los niveles de pH, hidratación, sebo y elasticidad. Imprescindible para el primer análisis de la piel.

Comprobar Pro

Como anteriormente. También incluye imágenes visuales HD de la piel con una cámara.

Foto tipo

Clasifica el tipo de piel en términos de respuesta a la exposición a la radiación ultravioleta (UVR).

Edad perfecta

Identifica los signos clave del envejecimiento de la piel, incluida la elasticidad, la pigmentación, el tono de la piel y los niveles de hidratación, lo que lo ayuda a brindar el cuidado requerido.

Edad perfecta pro

Como anteriormente. También incluye imágenes visuales HD de la piel con una cámara.

Protección solar

Desarrollado para aconsejar la protección solar para cada tipo de piel (melanina y foto tipo) exclusivamente en función de la zona de estancia.

Pureza.y

Para pieles con imperfecciones e impurezas que a menudo tienen un manto de aceite y humedad desequilibrado que conduce a una piel sensible.

Sensibilidad.y

Esta revisión de la piel evalúa los parámetros esenciales para comprender la sensibilidad de la piel y qué hacer al respecto.

Ilumin.y

¿Buscas lograr una piel radiante, más brillante y uniforme? Esta consulta evalúa varios parámetros, incluida la melanina, la textura de la piel y el nivel de células muertas de la piel.



PELO

Enfoque del cuero cabelludo

Un cabello excelente comienza con un cuero cabelludo saludable. Esta es una condición exhaustiva de evaluación del cuero cabelludo en la que basar sus recomendaciones.



ESCOTE

Experto en escote

Una consulta única valora la piel de la delicada zona del escote sujeta a envejecimiento y pérdida de tono.



MANOS

Belleza de manos

Las manos muestran los primeros signos de envejecimiento y están sujetas a un momento difícil. Esta consulta se centra en el envejecimiento y la sensibilidad de la piel.

FUNCIÓN EXCLUSIVA "CREA TU PROPIA CONSULTA"

Desarrolla consultas únicas para la tez, el cabello o el cuerpo con **Soft FX** según los requisitos de cuidado de la piel de su cliente y tratamientos/productos en oferta.

RESULTADOS

Informe completo entregado en un teléfono inteligente, tableta (iOS o Android) o por correo electrónico desde el dispositivo.



EJEMPLO ANÁLISIS DE ROSTRO

RESULTADOS


Fuera de Interpretaciones Subjetivas

COMENTARIOS Y CONSEJOS





Que apoyan su evaluación

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO/TRATAMIENTO

Basado en los resultados entregados

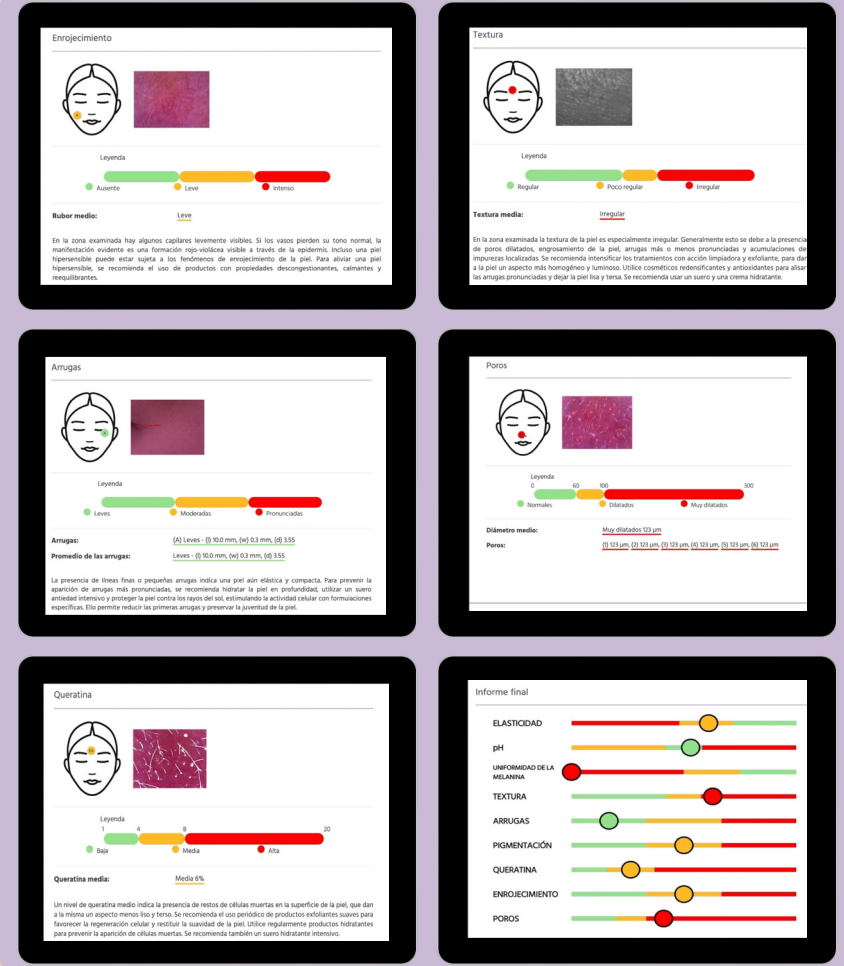

SEGUIMIENTO DE LAS TENDENCIAS Y MONITOREO DEL PROGRESO A LO LARGO DEL TIEMPO

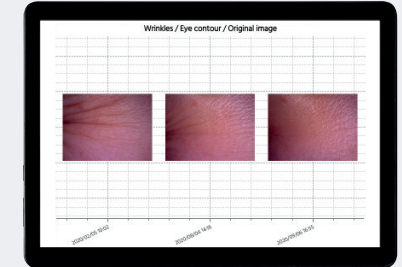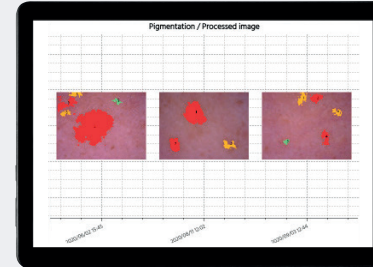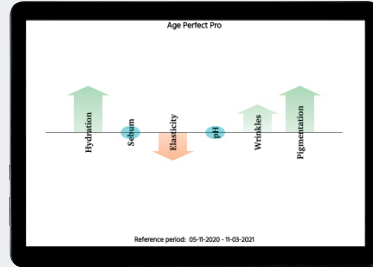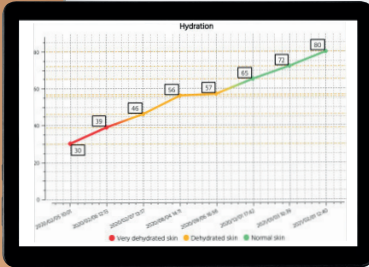

Realice un seguimiento de las tendencias de cuidado de la piel de sus clientes a lo largo del tiempo.

Compara imágenes de la piel antes y después del tratamiento.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MONITOR	TFT 10.1" con pantalla multitáctil capacitiva
CÁMARA DE CARA COMPLETA	Resolución máxima de 5MP 2592x1944 Enfoque automático Ángulo de visión de 60°
CONECTIVIDAD	Ethernet, Wi-Fi, punto de acceso Wi-Fi Las sondas se conectan a la unidad central mediante conexión Bluetooth Low Energy, a excepción de la microcámara USB
ALMACENAMIENTO INTERNO	4 GB
MONITOR EXTERNO	HDMI
INTERFAZ	2xUSB
PESO	3 kg
DIMENSIONES	310 (ancho) x 170 (fondo) x 225 (alto) mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	12v CC - 5A
ABSORCIÓN DE ENERGÍA	60 vatios máx.
LAS CONDICIONES DE TRABAJO	15 - 30 °C (Rh 5-85% sin condensación)
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	0 - 50 °C (Rh 5-85% sin condensación)
CUMPLIMIENTO	marca CE
CERTIFICACIÓN	marca MET

PRINCIPIO DE MEDICIÓN		CAMPO	RESOLUCIÓN
HIDRATACIÓN (MEL-HYD FX)	Método capacitivo	0-100 a.u.	1 a.u.
MELANINA (MEL-HYD FX)	Fotómetro de reflectancia de longitud de onda doble (λ 1=875nm, λ 2=660nm)	0-100 a.u.	1 a.u.
pH (pHFX)	Electrodo de vidrio sensible al pH	2-10	0.1
SEBO (CINTA FX)	Procesamiento de visión artificial de cinta sensible al sebo	0-100 u.a.	1 u.a.
ELASTICIDAD (ELA FX)	Estrés/deformación de la piel por aplicación de succión	0-100 a.u.	1 a.u.

SENSOR DE IMAGEN		MAGNIFICADOR	RESOLUCIÓN
MICROCAMARA (CAM FX)	Sensor de imagen CMOS de ¼ de color	Dos lentes disponibles: 100x y 400x	640x480 píxeles



Distribuido en Colombia por:

OTECH
 medical
www.otechmedical.co